

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Стол медицинский палатный (далее по тексту - стол) предназначен для использования в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.
- 1.2. Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Основные параметры и размеры столов указаны в таблице 1.

Таблица 1 .

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
1. Габаритные размеры, ±5 мм		
высота	750	750
ширина	850	1000
глубина	750	750
2. Масса, не более, кг	20	25

- 2.2. Характеристики:
- 2.2.1. Столы изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, а также ламинированной ДСП.
- 2.2.2. Номинальная распределенная нагрузочная способность столов не менее 80 кг.
- 2.2.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.2.4. Поверхность столов устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки столов соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
Каркас- столешница	1	1
Ножка	4	4
Гайка М10	4	4
Шайба пружинная 10	4	4
Инструкция по сборке	1	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Столы представляют собой сборно-разборную конструкцию.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия .

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

**7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 7.1. Стол имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

**8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 8.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
- 8.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
- 9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**


Стол медицинский палатный СП- «МСК» \_\_\_\_\_  
 Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.  
 Соответствует техническим условиям ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.  
 Подпись лиц, ответственных за приемку.

**11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
 Изделие \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия  
 \_\_\_\_\_  
номер ГОСТ или ТУ  
 Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
 Приобретено \_\_\_\_\_  
дата, подпись, штамп торгующей организации

## Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

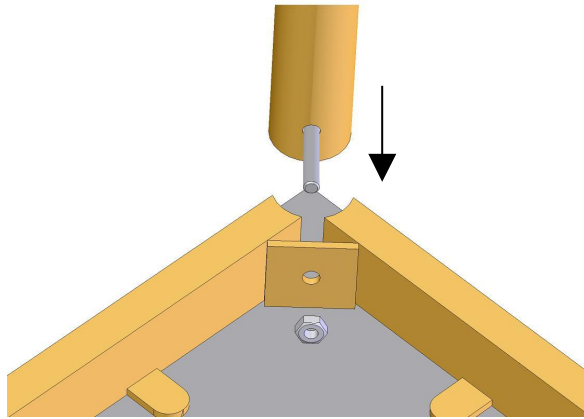

## Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

